


dyna 10

BİLGİSAYAR BAZLI ÜRODİNAMİK

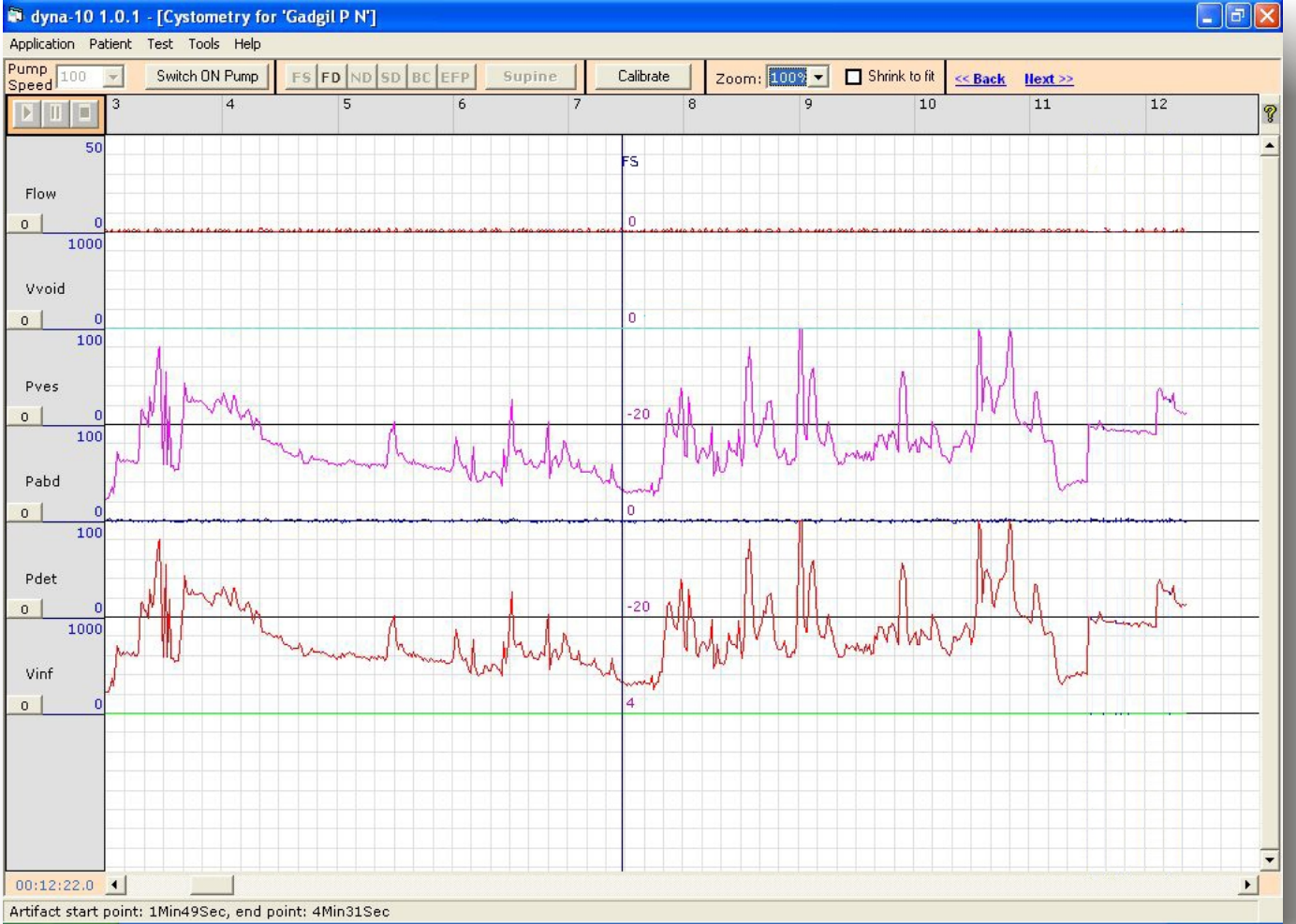

Gelişmiş Bilgisayar Bazlı Ürodinami

dyna-10 pratik, kullanıcı dostu basınç akım çalışmaları(BAÇ) için tasarlanmış kompakt/taşınabilir yüksek teknoloji(High-Tech) Ürodinami sistemidir. Cihaz herhangi bir bilgisayar ile çalışabilir. Hasta işlemeye başladığında araştırma otomatik başlar. Akım ve hacim ölçekleri ayarlanabilir. Hastanın datası test sonuçları ile birlikte hard diske kaydolur ve daha sonra istenildiği zaman ulaşılabilir.

Cihazın kendisinde bulunan yazıcıdan üroflovetri, sistometrogram (CMG) & Basınç -akım sonuçları ve hasta bilgisinin bulunduğu canlı ve temiz çıktılar almak mümkün. Ayrıca klinik/hastane adını da raporun en üstünde çıkarır. Grafikselsel basınç-akım çizelgeleri alfanumerik data tarafından desteklenmektedir.

6 Kanal : Akım, Boşaltılan Hacim, Pves, Pabd, Pdet, Akıtılan Hacim

Belirgin Özellikler

- Kullanıcı dostu bilgisayar bazlı sistem. Özel bir eğitim gerektirmez.
- Donanım ile iletişim için bilgisayarın paralel portlarını/bağlantısını kullanır. rt can Ayrıca aynı port/bağlantı noktası bir yazıcı ile paylaşılabilir.
- Renkli veya Siyah&Beyaz çıktı
- Bütün raporlar gerekli bilgilerin yer aldığı antetli kağıda çıkarılır.
- Minimum PC Gereksinimleri : 128MB RAM, 4GB HDD,WIN98 veya 2000 veya XP SP11 as OS ile çalışabilecek herhangi bir yazıcı
- Eşzamanlı renkli görüntüleme
- Uzun test süresi, 120 dakikaya kadar.
- Hastanın bilgisi test sonuçları ile birlikte bilgisayara kaydedilir ve istenildiği zaman ulaşılabilir.
- Onarım/Tamir maliyeti yok.
- Çıktı grafiksel ve çizgisel parametrelere sahiptir.
- Akım/Debi Ölçme Aralığı: 0~50 ml/sn.
- Hacim Ölçme Aralığı: 0~2000 ml.
- Basınç Ölçümü : -40 ile 300 cm. H₂O
- Standart vaka işaretleme. Eklenti yapmak her an mümkündür.
- Nokta&Kırmızı : İmleç hareket ettirdikçe zamanın belirlenmiş herhangi bir anında ki bütün kanalların değerlerini görebilirsiniz.
- Test düzenleme ayarları gelecek kullanımlar için tercih edilmiş ayarlar olarak kaydedilebilir.
- Otomataik artifakt tespiti
- Artifaktlar manuel olarak da işaretlenebilir.
- Artifaktları auto / manuel temizleme imkanı
- Tekrar kullanılabilir idrar konteynırı ve hunisi
- Akım/debi, hacim ve basınç için mükemmel sensör hassasiyeti
- Yürütülen her test için sonuçları tek bir kağıda veya bir çok kağıda yazdırabilme.
- Ful Online yardım ile paketleme
- 24saat e-mail yardım hattı - uysalgoksel@gmail.com

dyna 10

Üretici :



Apex Meditech

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



CE 1023

Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003
ISO 9001:2008

www.apex-meditech.com

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com